

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

DEOFINE POWDER デオファイン パウダー

ストーマ装具用パウダー状消臭剤
POWDERY DEODORANT FOR OSTOMATES

《デオファイン パウダー》はストーマ装具用パウダー状消臭剤です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取り扱い説明書に従いご使用ください。尚、商品についてご不明な点は下記までお問い合わせください。

●アルケア株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル0120-770175
土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30

使用上のご注意



警告 人身事故につながる恐れのある注意事項

- 本品は食べものではありません。高齢の方、認知症の方、乳幼児、小児が誤飲しないようご注意ください。粉末のため、むせたり喉につまったりする場合があります。
- 傷や腫れ物、湿疹等異常のある部位には使用しないでください。万が一付着した場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
- 皮膚・粘膜に発赤やかゆみ、刺激等の異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 目に入らないように注意し、万が一入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
- 鼻や口から吸入しないでください。万が一吸入した場合は、直ちに水でよく洗い流してください。

注意 使用方法に関する注意事項

- 消臭剤の付いた手で面板の粘着面に触れたり、消臭剤が付着しないようにご注意ください。面板の貼りつきが悪くなり、面板が剥がれやすくなる場合があります。
- ストーマ袋の嵌合部(はめ合わせ部)や閉鎖具(クリップやキャップ等)に付着しないようご注意ください。操作に違和感が生じたり、嵌合部や閉鎖具がはずれやすくなる場合があります。
- ストーマ袋内に充填して使用する他の製品との併用は避けてください。消臭性能が低下する場合があります。
- 1回使い切りとし、使い残りは通常可燃物として廃棄してください。開封したまま放置すると吸湿し、消臭性能が著しく低下したり品質に異常を来す場合があります。
- 衣服等に付着した場合は、速やかに払い落とし、通常の洗剤で洗濯してください。

使用方法

- 個包装を手やハサミ等で切って開封してください。
- 面板の粘着面やストーマ袋の嵌合部に消臭剤が付着しないように注意し、単品系装具の場合は面板ストーマ孔かストーマ袋の排出口から、二品系装具の場合はストーマ袋の嵌合口か排出口から、投入してください。
- 排泄物の排出ごとに、新しい個包装を開封してストーマ袋内に投入してください。

ストーマ孔・嵌合口からの投入方法(ストーマ袋装着前)

- 単品系(ワンピース)装具の場合
- 二品系(ツーピース)装具の場合


面板の剥離フィルムを剥がす前に、ストーマ孔から消臭剤を投入してください。

面板にはめ合わせる前に、嵌合口から消臭剤を投入してください。

※ご注意:下部開放型ストーマ袋の場合、排出口を必ず閉じてから消臭剤を投入してください。

排出口からの投入方法(ストーマ袋装着中)

便排泄後に新たに消臭剤を投入するときは、ストーマ袋を装着したまま下部排出口を斜め上に持ち上げ、個包装の先端をストーマ袋の奥のほうまで入れて消臭剤を投入ください。

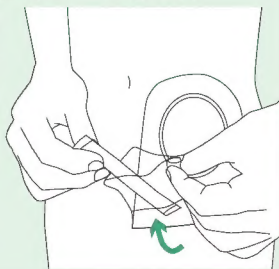

※ご注意:ストーマ袋の排出口付近に消臭剤が付着したり、また残留しないようご注意ください。閉鎖具(クリップやキャップ等)の密閉性に支障を来し、閉鎖具がはずれたりモレやすくなる場合があります。

保管・取扱上のご注意

- 個包装から他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、吸湿し品質が変わる場合があります)
- 乳幼児、小児、認知症の方の手の届かない所に保管してください。
- 個包装および箱の上に重いものを載せないでください。(個包装の変形・破損の原因となります)
- 直射日光および高温多湿を避け、室温保管してください。

廃棄方法

- 個包装の包材はプラスチック製品です。各自治体の分別方法に従ってください。

規格

種類	商品コードNO.	内容量	1箱入数
—	17891	1.5g	30包

アルケア株式会社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセンター19階
TEL:03-5611-7800(代表) FAX:03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>
東京営業所 TEL:03-5638-8161 仙台営業所 TEL:022-715-2733 広島営業所 TEL:082-831-6777
京都営業所 TEL:048-834-5614 名古屋営業所 TEL:052-222-3860 福岡営業所 TEL:092-441-8372
京都西営業所 TEL:045-472-7511 北陸営業所 TEL:076-243-5602
札幌営業所 TEL:011-261-1721 大阪営業所 TEL:06-6397-2985
INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL:81-3-5611-7819 ■アルケア医工研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター